


FCI®

CE

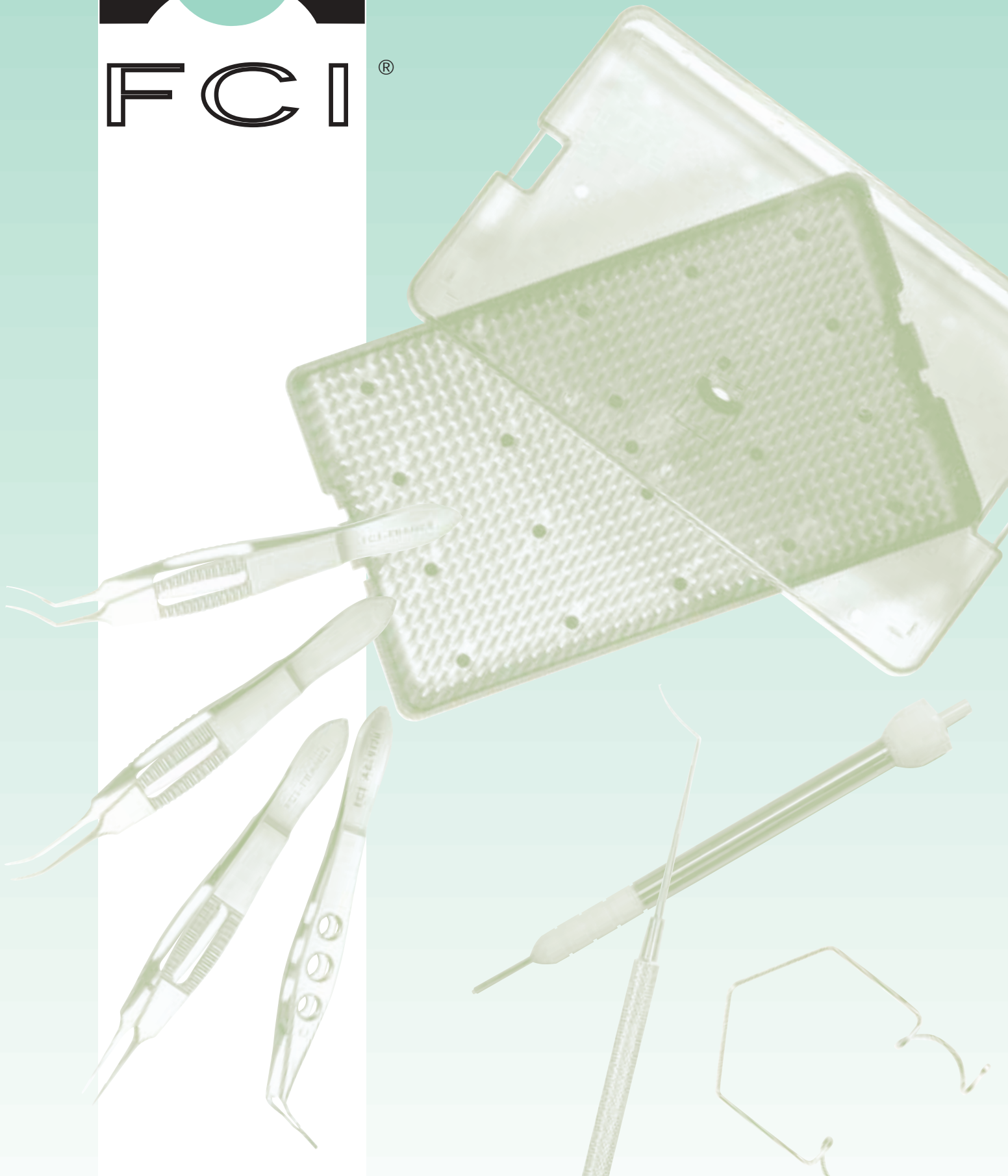

	Page		Page
BLEPHAROSTATS	1 - 2	SPECULUMS	1 - 2
RELEVEURS	2	RETRACTORS	2
PLAQUE A PAUPIERES	2	LID PLATE	2
ECARTEUR	2	RETRACTOR	3
COUTEAUX	3	KNIVES	3
AIGUILLE A CORPS ETRANGERS	3	SPUD	3
PORTE-LAMES	3	BLADE BREAKERS	3
TREPANS	4	TREPHINES	4
CURETTES	4	CURETTES	4
SPATULES	5	SPATULAS	5
CROCHETS	5 - 7	HOOKS	5 - 7
DIVERS	8	MISCELLANEOUS	8
CISEAUX	9 - 12	SCISSORS	9 - 12
KR	13	RK	13
CANULES	13 - 18	CANNULAS	13 - 18
PINCES	19 - 24	FORCEPS	19 - 24
PORTE-AIGUILLES	25 - 27	NEEDLE-HOLDERS	25 - 27
BOITES DE STERILISATION	28	STERILIZING TRAYS	28
VOIES LACRYMALES	29	LACRIMAL INSTRUMENTS	29
DCR	30	DACRYOLOGY	30
COUTEAUX DIAMANT HUCO®	31	HUCO® DIAMOND KNIVES	31

Les instruments chirurgicaux FCI® sont livrés NON STERILES.
ILS DOIVENT ETRE DECONTAMINES, NETTOYES ET STERILISES AVANT CHAQUE UTILISATION.

Les recommandations pour l'entretien de nos instruments de chirurgie en **acier inoxydable** et en **titane** sont les suivantes :

Rinçage :

- ne pas laisser sécher de sang ou de tissu sur l'instrument
- rincer l'instrument immédiatement après chaque utilisation avec de l'eau déminéralisée ou distillée

Décontamination :

- tremper l'instrument dans un bain décontaminant préparé selon les recommandations du fournisseur
- nous déconseillons l'utilisation de l'**hypochlorite de sodium**, ce décontaminant étant corrosif vis-à-vis de l'acier inoxydable

Inactivation chimique des Agents Transmissibles Non Conventionnels :

- nous recommandons l'utilisation d'une solution de soude 1N, préparée avec de l'eau déminéralisée, par trempage pendant 60 minutes à 20°C / 66°F. Cette inactivation doit être suivie d'un rinçage très soigneux jusqu'à ce que le pH du bain soit neutre. La présence de résidus de soude sur les instruments lors de la stérilisation est tenue responsable d'une corrosion importante. La présence d'ions chlorures dans les eaux de ville rend la solution de soude corrosive, d'où la nécessité d'utiliser de l'eau déminéralisée
- rincer soigneusement l'instrument avec de l'eau déminéralisée

Nettoyage :

- nettoyer l'instrument selon l'un de ces procédés :
 - avec une solution savonneuse et une brosse à poils souples
 - par un passage d'au moins 5 minutes au bac à ultrasons
 - en machine à laver
- sécher l'instrument rapidement et parfaitement

Stérilisation (inactivation physique des Agents Transmissibles Non Conventionnels) :

- stériliser l'instrument à l'autoclave selon un cycle validé (les paramètres recommandés sont 18 minutes à 134°C / 293°F, sous une pression de 2 bars)
- veiller à utiliser une boîte adaptée à ce mode de stérilisation

Conseils pratiques :

- traiter séparément les instruments fabriqués à partir de métaux différents
- ne pas mélanger des instruments en bon état avec d'autres corrodés ou abîmés
- vérifier les fonctions et la propreté de chaque instrument après nettoyage

Cas particuliers des Couteaux Diamant HUCO® :

Les couteaux diamant HUCO® présentés en page 31 nécessitent un entretien particulier. Nous vous conseillons de vous conformer aux indications données dans la notice les accompagnant.

FCI® surgical instruments are shipped NON STERILE.
THEY MUST BE DECONTAMINATED, CLEANED AND STERILIZED BEFORE EACH USE.

Our recommendations for the cleaning of our stainless steel and titanium surgical instruments are as follows:

Rinsing:

- remove blood and tissue immediately after use by rinsing with demineralized or distilled water

Decontamination:

- immerse the instrument in the decontaminating solution and follow the manufacturer's instruction
- avoid the use of chlorine that may corrode the stainless steel instruments

Chemical inactivation of non conventional transmittable agents:

- we recommend that the instruments are soaked in a 1N sodium hydroxide solution prepared with demineralized or distilled water for 60 minutes at 20°C / 66°F. This inactivation should be followed by a very careful soaking, until the pH value is neutral. The presence of residual sodium hydroxide on the instruments may cause corrosion during the sterilization. The presence of chlorine in tap water makes the sodium hydroxide solution corrosive, and therefore it is necessary to use demineralized or distilled water
- rinse the instrument carefully with demineralized water

Cleaning:

- clean the instrument following one of these processes:
 - mild soap solution and soft bristled toothbrush
 - ultrasonic procedure for at least 5 minutes
 - using a washing machine
- dry instrument quickly and completely

Sterilization (physical inactivation of non conventional transmittable agents):

- steam sterilization following a validated cycle according to your institution's standards (recommended parameters are: 18 minutes at 134°C / 293 °F, at 2 bars)
- take care to use an adapted sterilization box

Practical advice:

- treat the instruments made from different metals separately
- do not mix instruments in good condition with instruments that are corroded or damaged
- check the function and the cleanliness of each instrument after cleaning

Cleaning of HUCO® Diamond knives

HUCO® Diamond knives presented on page 31 require a special cleaning procedure. Follow the instructions for use.



BLEPHAROSTAT DE BARRAQUER COLIBRI
5 mm (pour bébé)

A1-1000

BARRAQUER WIRE SPECULUM
5 mm (infant)

A1-1000




BLEPHAROSTAT DE BARRAQUER COLIBRI
10 mm

A1-1010

BARRAQUER WIRE SPECULUM
10 mm

A1-1010

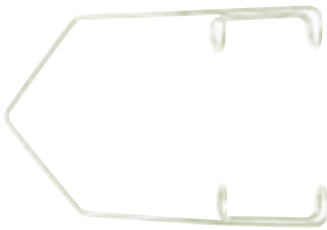


BLEPHAROSTAT DE BARRAQUER COLIBRI
15 mm

A1-1020

BARRAQUER WIRE SPECULUM
15 mm

A1-1020

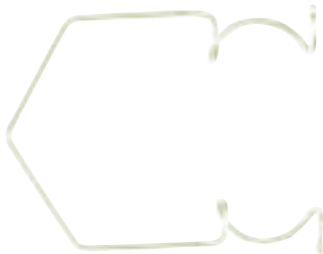

BLEPHAROSTAT POUR PHACO
Avec fenêtres ouvertes pour faciliter l'accès de la pièce à main phaco

A1-1030

WIRE SPECULUM FOR PHACO
With open blades for unobstructed access to the cataract incision with phaco tip

A1-1030




BLEPHAROSTAT DE CORCELLE

A1-1100

CORCELLE EYE SPECULUM

A1-1100

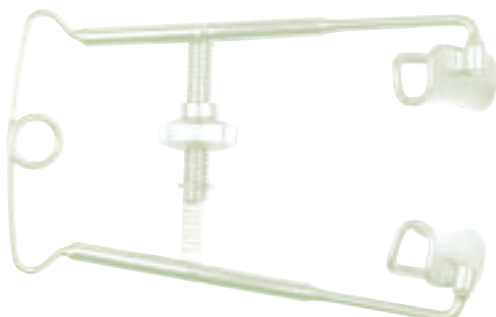

BLEPHAROSTAT DE PLEY

A1-1150

PLEY EYE SPECULUM

A1-1150



BLEPHAROSTAT DE CASTROVIEJO **CASTROVIEJO EYE SPECULUM**

A1-1400

A1-1400

RELEVEURS

RETRACTORS

RELEVEUR A PAUPIERES DE DESMARRES

DESMARRES LID RETRACTOR

10 mm

10 mm



A1-2010

A1-2010

RELEVEUR A PAUPIERES DE DESMARRES

DESMARRES LID RETRACTOR

12 mm

12 mm



A1-2012

A1-2012

RELEVEUR A PAUPIERES DE DESMARRES

DESMARRES LID RETRACTOR

14 mm

14 mm



A1-2014

A1-2014

PLAQUE A PAUPIERES

LID PLATE



PLAQUE A PAUPIERES DE JAEGER **JAEGER LID PLATE**

A1-2100

A1-2100

ECARTEUR

RETRACTOR

ECARTEUR DE BONN

BONN RETRACTOR

Pour le DR

Used in retinal detachment

A1-2210

A1-2210



COUTEAU CLIVEUR DE PAUFIQUE
6 mm

PAUFIQUE SCLEROTOME KNIFE
6 mm

A1-3406

A1-3406



5 mm

5 mm

A1-3405

A1-3405



AIGUILLE A C.E.

SPUD

AIGUILLE A CORPS ETRANGERS

FOREIGN BODY SPUD

A1-4000

A1-4000



PORTE-LAMES

BLADE BREAKERS


PORTE-LAME DE TROUTMAN

TROUTMAN BLADE BREAKER
AND HOLDER
Straight, 9 cm

Droit, 9 cm

A1-5000

A1-5000

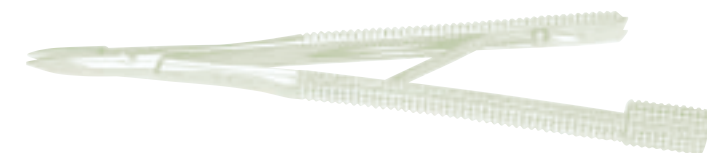

LAMES DE RASOIR

RAZOR BLADES

Paquet de 10

Package of 10

A1-5040

A1-5040



MANCHE BISTOURI N° 3

PARKER HANDLE # 3

A1-6000

A1-6000



LAME BISTOURI N° 11
Pour A1-6000 (boîte de 100)

PARKER BLADE # 11
For A1-6000 (box of 100)

A1-6011

A1-6011



TREPANS

TREPHINES

TREPAN MODELE FCI

Pour poser la kératoprothèse.

Diamètre 4,5 mm

A1-7145



TREPHINE FCI TYP

For keratoprosthesis surgery

4.5 mm diameter

A1-7145

TREPAN MODELE FCI

Pour poser la kératoprothèse.

Diamètre 6,0 mm

A1-7160



TREPHINE FCI TYP

For keratoprosthesis surgery

6.0 mm diameter

A1-7160

CURETTES

CURETTES

CURETTE A VOIE LACRYMALE DE J.A. BERNARD

A2-1101



J.A. BERNARD LACRIMAL CURETTE

A2-1101

CURETTE A CHALAZION DE MEYERHOEFER

Diamètre 1,5 mm ○

A2-1115



MEYERHOEFER CHALAZION CURETTE

1.5 mm diameter ○

A2-1115

Diamètre 2,0 mm ○

A2-1120



2.0 mm diameter ○

A2-1120

Diamètre 2,5 mm ○

A2-1125



2.5 mm diameter ○

A2-1125

Diamètre 3,5 mm ○

A2-1135



3.5 mm diameter ○

A2-1135

CURETTE A EVISCERATION

A2-2200



EVISCERATION SPOON

A2-2200

SPATULE A IRIS DE CULLER
Largeur 1 mm

CULLER IRIS SPATULA
1 mm wide

A2-3401

A2-3401



SPATULE DE BARRAQUER
Très fine - Longueur 12 mm

BARRAQUER SPATULA
Extremely delicate, length 12 mm

A2-3500

A2-3500




SPATULE DE CORNIC
Pour phacosection

CORNIC NUCLEUS VECTIS
For small incision surgery (phacosection)

A2-3600

A2-3600

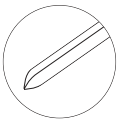

BISECTEUR DE TEYSSIER
Pour phacosection

TEYSSIER NUCLEUS BISECTOR
For manual small incision surgery (phacosection)

A2-3720

A2-3720



CROCHETS

HOOKS

CROCHET A STRABISME DE GRAEFE

GRAEFE MUSCLE HOOK

A2-4010

A2-4010



CROCHET DE GASS ROUCHY
Perforé pour passer les fils dans les muscles pendant le DR

GASS ROUCHY HOOK
Retinal detachment hook with hole

A2-4060

A2-4060



CROCHET A DR
Très court (10 cm)

RETINAL DETACHMENT HOOK
10 cm

A2-4070

A2-4070



CROCHET D'ARRUGA
Main droite

ARRUGA HOOK
Right hand

A2-4110

A2-4110

CROCHET D'ARRUGA
Main gauche

ARRUGA HOOK
Left hand

A2-4120

A2-4120

CROCHET DE GILLIES
Pour les paupières (grand)

GILLIES LID HOOK
Large

A2-4200

A2-4200

CROCHET DE GILLIES
Petit

GILLIES LID HOOK
Small

A2-4210

A2-4210



MICRO-CROCHET A IRIS DE BONN
Coudé, mousse

BONN MICRO IRIS HOOK
Blunt tip, angled

A2-4300

A2-4300



CROCHET BOUTON DE COL
Pour manipuler l'iris

COLLAR BUTTON HOOK
Micro-iris retractor

A2-4320

A2-4320



CROCHET DE SINSKEY
Pour manipuler l'implant

SINSKEY HOOK
Lens manipulating hook, angled

A2-4400

A2-4400



CROCHET DE SINSKEY MODIFIE CORNIC
Pour manipuler l'implant

SINSKEY CORNIC HOOK
Lens manipulating hook, angled

A2-4410

A2-4410




CROCHET DE JAFFE BECHERT
Pour manipuler le noyau pendant la phacoémulsification

JAFFE BECHERT HOOK
Lens nucleus rotator

A2-4500

A2-4500

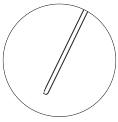

MANIPULATEUR D'ARNEODO
Pour manipuler le noyau pendant la phacoémulsification

ARNEODO MICRO MANIPULATOR
For phacoemulsification

A2-4510

A2-4510



MANIPULATEUR DE LEBUISSON
Pour manipuler le noyau pendant la phacoémulsification

LEBUISSON MICRO MANIPULATOR
For phacoemulsification

A2-4520

A2-4520



CHOPPER
Pour phaco

PHACO CHOP
Pour phaco

A2-4550

A2-4550



CROCHET DE LESTER
Pour manipuler l'implant

LESTER IOL MANIPULATOR
For lenses with or without holes

A2-4700

A2-4700

ANSE DE SNELLEN

SNELLEN LENS LOOP

A2-5000

A2-5000




ANSE IRRIGATRICE DE PEARCE

PEARCE IRRIGATING CANNULA

A2-5100

A2-5100



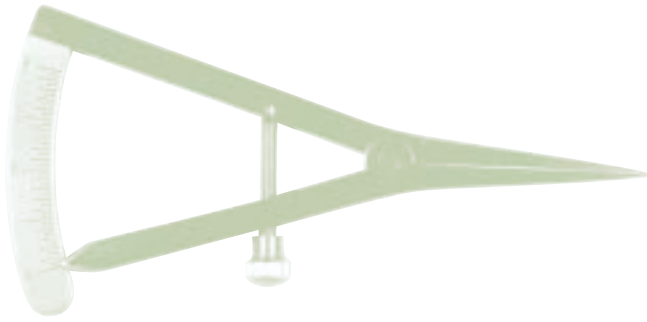

COMPAS DE CASTROVIEJO
20 mm

CASTROVIEJO CALIPER
20 mm spread

A2-6000

A2-6000



SERINGUE 3 ml

SYRINGE 3 ml

A2-7403

A2-7403




SERINGUE 5 ml

SYRINGE 5 ml

A2-7405

A2-7405

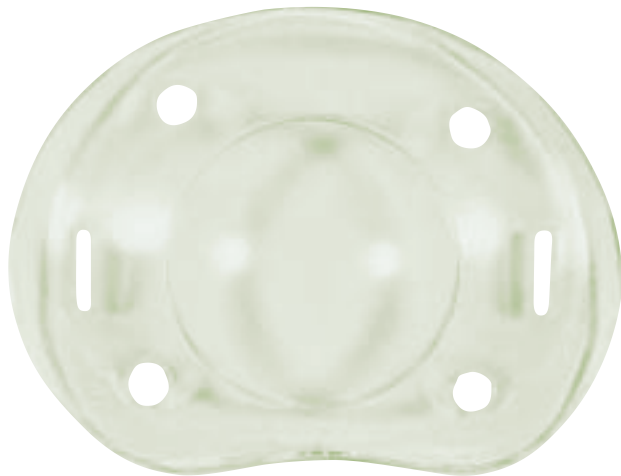

COQUE EN PLASTIQUE
Transparente

UNIVERSAL EYE SHIELD
Transparent

A2-7500

A2-7500



MARQUEUR POUR LE DR

**SCLERAL DEPRESSOR AND
FIXATION PICK**

For retinal detachment

A2-7710

A2-7710




ASTIC-DISC
*Pour contrôler l'astigmatisme en per-
opérateur*

ASTIC-DISC
*Intra-operative instrument for
qualitative measurement of astigmatism*

A2-9000

A2-9000

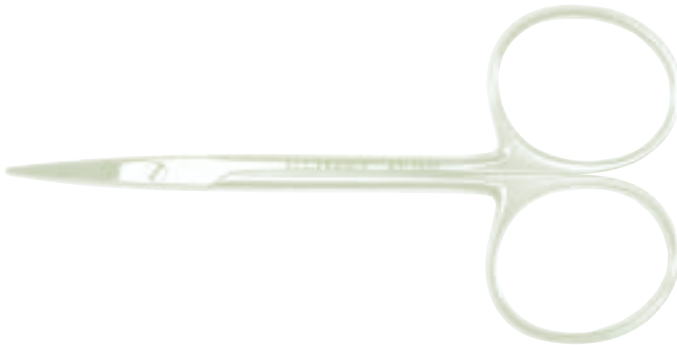

CISEAUX DE BONN
9 cm, droit, mousse

BONN SCISSORS
9 cm, straight, blunt tips

A3-1000

A3-1000



CISEAUX DE BONN
9 cm, courbe, mousse

BONN SCISSORS
9 cm, curved, blunt tips

A3-1010

A3-1010



CISEAUX DE BONN
9 cm, droit, pointu

BONN SCISSORS
9 cm, straight, pointed tips

A3-1020

A3-1020



CISEAUX DE BONN
9 cm, courbe, pointu

BONN SCISSORS
9 cm, curved, pointed tips

A3-1030

A3-1030



CISEAUX D'OPHTALMOLOGIE
10,5 cm, droit, mousse

EYE SCISSORS
10.5 cm, straight, blunt tips

A3-1100

A3-1100



Courbe, mousse

Curved, blunt tips

A3-1110

A3-1110



Droit, pointu

Straight, pointed tips

A3-1120

A3-1120



Courbe, pointu

Curved, pointed tips

A3-1130

A3-1130



CISEAUX DE SEVRIN STEVENS
Tenotomie
Droit, mousse
 A3-1200

SEVRIN STEVENS TENOTOMY
SCISSORS
Straight, blunt tips
 A3-1200




Courbe mousse
 A3-1210

Curved, blunt tips
 A3-1210



Droit, pointu
 A3-1220

Straight, pointed tips
 A3-1220

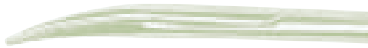

Courbe, pointu
 A3-1230

Curved, pointed tips
 A3-1230

CISEAUX A ENUCLEATION
 A3-1300

ENUCLATION SCISSORS
 A3-1300



CISEAUX A IRIDECTOMIE DE
WECKER
Mousse
 A3-2000

WECKER IRIS SCISSORS
Blunt tips
 A3-2000





CISEAUX A IRIDECTOMIE DE BARRAQUER
Lames mousses, 7 mm

BARRAQUER IRIS SCISSORS
7 mm long blades, blunt tips

A3-2010

A3-2010



CISEAUX DE WESTCOTT
Ténatomie
Courbe, mousse

WESTCOTT TENOTOMY SCISSORS
Curved, blunt tips

A3-3000

A3-3000



CISEAUX DE CASTROVIEJO
Lames normales, mousse

CASTROVIEJO SCISSORS
Curved, blunt tips, regular blades

A3-3100

A3-3100



Lames petites, mousse

Blunt tips, small blades

A3-3110

A3-3110



CISEAUX DE KATZIN A LAMES INVERSEES
Lames normales, à droite

KATZIN CORNEAL TRANSPLANT SCISSORS
Standard blades, right

A3-3250

A3-3250



Lames normales, à gauche

Standard blades, left

A3-3260

A3-3260



CISEAUX DE KATZIN A LAMES INVERSEES
Micro lames, à droite

KATZIN CORNEAL TRANSPLANT SCISSORS
Blunt tips, small blades, right

A3-3270

A3-3270




Micro lames, à gauche

Blunt tips, small blades, left

A3-3280

A3-3280

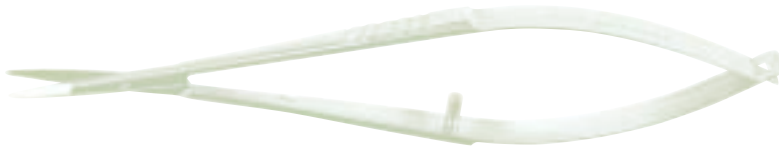

CISEAUX DE VANNAS
Lames 8 mm, droit, mousse

VANNAS IRIS SCISSORS
8 mm blades, straight, blunt tips

A3-4000

A3-4000



Courbe, mousse

Curved, blunt tips

A3-4010

A3-4010



MICRO CISEAUX DE VANNAS
Lames 5 mm, droit, mousse

VANNAS SCISSORS
5 mm blades, straight, blunt tips

A3-4020

A3-4020



Courbe, mousse

Curved, blunt tips

A3-4030

A3-4030



CISEAUX A CAPSULE DE CORNIC
Courbe, lames ultra fines, 13 mm

CORNIC CAPSULOTOMY SCISSORS
Curved, extra thin 13 mm long blades

A3-5000

A3-5000



CISEAUX A CAPSULE DE LAFORGE CORNIC
Lames 13 mm très courbes

LAFORGE CORNIC CAPSULOTOMY SCISSORS
Extra thin 13 mm long blades, strong curve

A3-5010

A3-5010



CISEAUX A CAPSULE DE GALAND
Coudé

GALAND CAPSULOTOMY SCISSORS
Angled forward

A3-5100

A3-5100




CISEAUX A CAPSULE DE LESCURE GALAND
Coudé, courbe

LESCURE GALAND CAPSULOTOMY SCISSORS
Curved blades angled forward

A3-5110

A3-5110

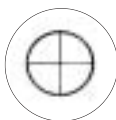
MARQUEUR OPTIQUE DE HOFFER
Avec viseur en croix
HOFFER OPTIC ZONE MARKER
With extra fine cross hairs


ø 3,00 mm	A4-1300	ø 3.00 mm	A4-1300
ø 3,25 mm	A4-1325	ø 3.25 mm	A4-1325
ø 3,50 mm	A4-1350	ø 3.50 mm	A4-1350
ø 3,75 mm	A4-1375	ø 3.75 mm	A4-1375
ø 4,00 mm	A4-1400	ø 4.00 mm	A4-1400
ø 6,00 mm	A4-1600	ø 6.00 mm	A4-1600
ø 7,00 mm	A4-1700	ø 7.00 mm	A4-1700


ANNEAU DE FIXATION SCLERALE
Multiple teeth
GLOBE FIXATION RING
Multiple teeth

A4-3100	A4-3100
---------	---------

CANULES
CANNULAS

CANULE DE CHARLEUX 13 mm
Pour l'extraction du cortex
CHARLEUX CANNULA 13 mm
Cortex extractor cannula

ø 0,6 mm	A5-1000	ø 0.6 mm	A5-1000
ø 0,5 mm	A5-1010	ø 0.5 mm	A5-1010
ø 0,4 mm	A5-1015	ø 0.4 mm	A5-1015


CANULE DE CHARLEUX 20 mm
Pour l'extraction du cortex
CHARLEUX CANNULA 20 mm
Cortex extractor cannula

0,6 mm	A5-1020	0.6 mm	A5-1020
--------	---------	--------	---------


CANULE DE SIMCOE
Trou d'aspiration 0,3 mm
SIMCOE CANNULA
Cortex extractor cannula

A5-1050	A5-1050	0.3 mm aspiration port	A5-1050
---------	---------	------------------------	---------


CANULE DE BINKHORST
Droite, 0,6 mm
BINKHORST CANNULA
Straight, front opening, 0.6 mm dia.

A5-1100	A5-1100
---------	---------


CANULE DE BINKHORST
A gauche
BINKHORST CANNULA
Left, front opening

A5-1110	A5-1110
---------	---------


CANULE DE BINKHORST
A droite
BINKHORST CANNULA
Right, front opening

A5-1120	A5-1120
---------	---------



CANULE THX DOUBLE COURANT
Coaxiale, courbe, dia. 1,1 mm

Trou d'aspiration :
 ø 0,3 mm A5-1213
 ø 0,2 mm A5-1222
 ø 0,4 mm A5-1234

THX I/A CANNULA
Coaxial, curved, 1.1 mm dia.

Aspiration port:
 ø 0.3 mm A5-1213
 ø 0.2 mm A5-1222
 ø 0.4 mm A5-1234



CANULE THX-TEYSSIER
Pour le lavage du cortex après la phacosection

Trou d'aspiration :
 ø 0,6 mm A5-1235

THX TEYSSIER I/A CANNULA
To remove the cortex during small incision surgery (phacosection)

Bevelled aspirating port:
 ø 0.6 mm A5-1235



CANULE THX MODIFIEE TURUT
Charleux double courant
Trou d'aspiration biseauté

A5-1240

THX TURUT I/A CANNULA
(Charleur I/A cannula)
Bevelled aspirating port

A5-1240




RACCORD MALE-MALE

A5-1340

MALE-MALE CONNECTOR

A5-1340

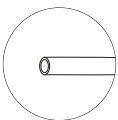


CANULE D'IRRIGATION

ø 1,0 mm A5-1341


IRRIGATING CANNULA

ø 1.0 mm A5-1341

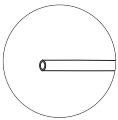

ø 0,6 mm A5-1342

ø 0.6 mm A5-1342

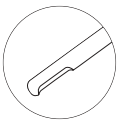


CANULE DE GUERIN
Pour nettoyage de la face postérieure de la capsule antérieure

A5-1343

GUERIN CANNULA
To polish the back side of the anterior capsule

A5-1343

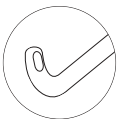

CANULE DE GUERIN
Pour nettoyage de la face postérieure de la capsule antérieure à midi

A5-1344


GUERIN CANNULA
To polish the back side of the anterior capsule at twelve o'clock

A5-1344



CANULE DOUBLE COURANT DE SIMCOE INVERSEE
Aspiration côté canon central dia. 0,3
 A5-1300

REVERSED SIMCOE I/A CANNULA
Aspirating port 0.3 mm dia.
 A5-1300

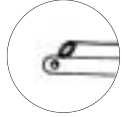

CANULE DOUBLE COURANT DE SIMCOE ORIGINALE
Aspiration côté tuyau silicone
Trou d'aspiration 0,3 mm
 A5-1350

ORIGINAL SIMCOE I/A CANNULA
Aspirating port 0.3 mm dia.
 A5-1350



CANULE THX DOUBLE COURANT «CLUB DE GOLF»
Pour les masses de midi
Trou d'aspiration latéral 0,3 mm
 A5-1400

THX «CLUB DE GOLF» I/A CANNULA
For twelve o'clock cortex extraction
Aspirating port 0.3 mm dia.
 A5-1400




CANULE THX DOUBLE COURANT «CLUB DE GOLF»
Trou d'aspiration distal
 A5-1410

THX «CLUB DE GOLF» I/A CANNULA
Front opening
 A5-1410



TUBE SILICONE (1 mètre)
Pour canules THX
 A5-1450

SILICONE TUBING (1 meter)
For THX cannulas
 A5-1450

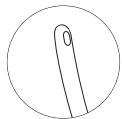

CANULE DE CHAZALON
Pour aspirer les masses de midi en passant par la contre incision
 A5-1460

CHAZALON CANNULA
To remove the twelve o'clock cortex going through the side incision
 A5-1460


CANULE DE CHAZALON POUR GAUCHER
 A5-1465

CHAZALON CANNULA FOR LEFT HANDED SURGEON
 A5-1465



CANULE THX MODIFIEE LAFORGE
Trou d'aspiration biseauté
Dia. ext. 1,5 mm
 A5-1500

LAFORGE THX CANNULA
Outer dia. 1.5 mm
Bevelled aspirating port
 A5-1500

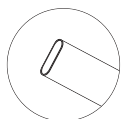

CANULE POUR HYDRODISSECTION
 A5-1600

HYDRO-DISSECTION CANNULA
 A5-1600



CANULE POUR LE HEALON
Coudée à 10 mm, dia. 0,5 mm
 A5-2000

HEALON CANNULA
Angled 10 mm from tip, 0.5 mm dia.
 A5-2000



CANULE DE RYCROFT
Pour injection d'air

ø 0,3 mm A5-2113
ø 0,4 mm A5-2114

RYCROFT AIR CANNULA
For air injection

ø 0.3 mm A5-2113
ø 0.4 mm A5-2114



CANULE DE BARRAQUER
A bout olivaire

ø 0,5 mm A5-2200

BARRAQUER CANNULA
Delicate olive tip

ø 0.5 mm A5-2200



CANULE GRATTEUSE
Courbe

A5-4100

ABRASIVE CANNULA
Curved

A5-4100



CANULE DE CHARLEUX
GRATTEUSE

A5-4200

CHARLEUX ABRASIVE
CANNULA

A5-4200



CANULE DE KRATZ GRATTEUSE
Avec face inférieure de l'olive agressive

A5-4300

KRATZ ABRASIVE CANNULA
Olive tip with abrasive inferior side, front opening

A5-4300



CANULE THX GRATTEUSE
Trou d'aspiration 0,3 mm

A5-4600

THX ABRASIVE CANNULA
Aspirating port facing into curve

A5-4600



CANULE DE GALEZOWSKI
Pour voies lacrymales
Courte, droite, 14 mm

A5-5000

GALEZOWSKI CANNULA
Lacrimal cannula
Small, straight, 14 mm

A5-5000



CANULE DE GALEZOWSKI
Courbe

A5-5100

GALEZOWSKI CANNULA
Curved

A5-5100



CANULE DE GALEZOWSKI
Longue, 18 mm

A5-5200

GALEZOWSKI CANNULA
Long, 18 mm

A5-5200




CANULE DE GASTAUD Moyenne
Pour échange sérum-air et pour viscochirurgie du segment postérieur

A5-6000

MEDIUM GASTAUD CANNULA
For replacing serum with air. For viscosurgery during vitreo retinal surgery

A5-6000

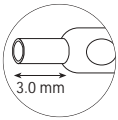

CANULE DE GASTAUD II
Pour injecter la décaline

A5-6010

GASTAUD II CANNULA
To inject liquid perfluoro carbon

A5-6010



CANULE DE GASTAUD III Longue
Pour drainer le liquide sous-rétinien chez les myopes

A5-6020

LONG GASTAUD III CANNULA
For aspiration of sub-retineal liquid in myopic eyes

A5-6020



MANCHE PORTE-CANULE DE KELLER
Prise femelle (téflon)

A5-8000

KELLER CANNULA HANDLE
(Teflon) Conus end female

A5-8000



MANCHE PORTE-CANULE DE KELLER
Prise mâle (téflon)

A5-8010

KELLER CANNULA HANDLE
(Teflon) Conus end male

A5-8010



MANCHETTE DE KELLER
Prise mâle

A5-8020

SHORT KELLER CANNULA HANDLE
Conus end male

A5-8020


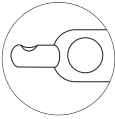




















MANCHETTE DE KELLER
Prise femelle

A5-8030

SHORT KELLER CANNULA HANDLE
Conus end female

A5-8030

		<p>MANCHE PORTE-CANULE Pour canules interchangeables</p> <p>A5-9200</p>	<p>UNIVERSAL I/A HANDPIECE For interchangeable tips</p> <p>A5-9200</p>
		<p>CANULE DROITE Pour manche A5-9200 Trou d'aspiration 0,3 mm</p> <p>A5-9301</p>	<p>STRAIGHT TIP For A5-9200 handpiece Aspirating port 0.3 mm</p> <p>A5-9301</p>
		<p>CANULE COUDEE A 45° Pour manche A5-9200 Trou d'aspiration 0,3 mm</p> <p>A5-9303</p>	<p>45° ANGLED TIP For A5-9200 handpiece Aspirating port 0.3 mm</p> <p>A5-9303</p>
		<p>CANULE COUDEE A 90° Pour manche A5-9200 Trou d'aspiration 0,3 mm</p> <p>A5-9304</p>	<p>90° ANGLED TIP For A5-9200 handpiece Aspirating port 0.3 mm</p> <p>A5-9304</p>
		<p>CANULE CROSSE D'EVEQUE Pour manche A5-9200 Trou d'aspiration en bout</p> <p>A5-9306</p>	<p>BINKHORST TIP For A5-9200 handpiece Front opening</p> <p>A5-9306</p>
		<p>MANCHE I/A FCI Pour canules amovibles</p> <p>A5-9400</p>	<p>FCI I/A HANDPIECE For interchangeable tips</p> <p>A5-9400</p>
		<p>CANULE AMOVIBLE DROITE Pour manche I/A A5-9400 Trou d'aspiration 0,3 mm</p> <p>A5-9401</p>	<p>STRAIGHT INTERCHANGEABLE TIP For A5-9400 I/A handpiece Aspirating port 0.3 mm</p> <p>A5-9401</p>
		<p>CANULE AMOVIBLE COURBE Pour manche I/A A5-9400 Trou d'aspiration 0,3 mm</p> <p>A5-9402</p>	<p>CURVED INTERCHANGEABLE TIP For A5-9400 I/A handpiece Aspirating port 0.3 mm</p> <p>A5-9402</p>
		<p>CANULE AMOVIBLE COUDEE Pour manche I/A A5-9400 Trou d'aspiration 0,3 mm</p>	<p>ANGLED INTERCHANGEABLE TIP For A5-9400 I/A handpiece Aspirating port 0.3 mm</p>
		<p>Coudée à 45° A5-9403 Coudée à 90° A5-9404</p>	<p>45° angled A5-9403 90° angled A5-9404</p>
		<p>CANULE AMOVIBLE DE BINKHORST Pour manche I/A A5-9400 Trou d'aspiration en bout</p> <p>A5-9406</p>	<p>BINKHORST INTERCHANGEABLE TIP For A5-9400 I/A handpiece Front opening</p> <p>A5-9406</p>



**PINCE DE KELMAN MAC
PHERSON**

11 mm, avec plateaux

A6-1300

**KELMAN McPHERSON
FORCEPS**

Angled, very delicate 11 mm long
smooth jaws

A6-1300



PINCE D'UTRATA

Pour le capsulorhexis (bouts mousSES)

A6-1500

UTRATA FORCEPS

For capsulorhexis. Very delicate
grasping tips

A6-1500



PINCE D'UTRATA COURBE

Pour le capsulorhexis (bouts mousSES)

A6-1510

CURVED UTRATA FORCEPS

For capsulorhexis. Very delicate
grasping tips and extremely thin 11
mm long vaulted shanks

A6-1510



PINCE DE CORYDON

Courbe, bouts pointus, corps rond,
titane

A6-1520

CORYDON FORCEPS

Extremely thin 11 mm long shanks
cystotome shaped tips (Titanium)

A6-1520



PINCE DE CORYDON

Courbe, bouts pointus, corps plat,
titane

A6-1530

CORYDON FORCEPS

Extremely thin 11 mm long shanks
cystotome shaped tips (Titanium)
Flat handle

A6-1530



PINCE D'UTRATA

Bouts mousSES, corps plat, titane

A6-1540

UTRATA FORCEPS

For capsulorhexis. Very delicate
grasping tips and extremely thin
11 mm long vaulted shanks (Titanium)
Flat handle

A6-1540



PINCE D'UTRATA

Bouts mousSES, corps rond, titane

A6-1550

UTRATA FORCEPS

For capsulorhexis. Very delicate
grasping tips and extremely thin
11 mm long vaulted shanks (Titanium)

A6-1550



PINCE A CHALAZION DE DESMARRES

20 mm A6-2020

DESMARRES CHALAZION FORCEPS

20 mm A6-2020



PINCE A CHALAZION DE DESMARRES

26 mm A6-2026

DESMARRES CHALAZION FORCEPS

26 mm A6-2026



PINCE A CILS DE BARRAQUER

A6-3000

BARRAQUER CILIA FORCEPS

A6-3000



PINCE A DISSEQUER
Droite, mors striés

A6-3100

DRESSING FORCEPS
Serrated, straight

A6-3100



PINCE A DISSEQUER
Droite, 1 x 2 dents (0,7 mm)

A6-3120

TISSUE FORCEPS
Straight, 1 x 2 teeth (0.7 mm)

A6-3120



PINCE D'ADSON BROWN
Mors striés

A6-3150

ADSON BROWN FORCEPS
Serrated jaws, straight

A6-3150



PINCE D'ADSON
1 x 2 dents

A6-3160

ADSON TISSUE FORCEPS
1 x 2 teeth

A6-3160



PINCE DE HALSTED
10 cm, mors striés

A6-4000

HALSTED MOSQUITO FORCEPS
10 cm, serrated jaws

A6-4000

PINCE DE HALSTED
10 cm, 1 x 2 dents

A6-4010

HALSTED MOSQUITO FORCEPS
10 cm, 1 x 2 teeth

A6-4010



PINCE PUCE
5 cm, droite, pour tendre les fils

A6-4100

SERREFINE
5 cm, straight

A6-4100



PINCE A CHAMPS
8 cm

A6-4200

TOWEL CLAMP
8 cm

A6-4200




PINCE DE HARMS TUBINGEN
Pour sutures 7-0 à 9-0
Courbe

A6-5060

HARMS TUBINGEN FORCEPS
Tying forceps for 7-0 to 9-0 sutures
Curved

A6-5060

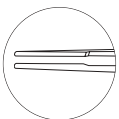

**PINCE A MONOFILAMENT
TROUTMAN**
Pour sutures 9-0 à 11-0, droite

A6-5100

TROUTMAN TYING FORCEPS
Very delicate smooth jaws with long
platform for 9-0 to 11-0 sutures
Straight

A6-5100



PINCE A MONOFILAMENT TROUTMAN
Pour sutures 9-0 à 11-0
Courbe

A6-5110

TROUTMAN TYING FORCEPS
Very delicate smooth jaws with long platform for 9-0 to 11-0 sutures
Curved

A6-5110



PINCE A MONOFILAMENT
Courbe, titane, corps rond

A6-5120

MONOFILAMENT TYING FORCEPS
Very delicate smooth jaws with long platform for 9-0 to 11-0 sutures
Curved, titanium

A6-5120



PINCE A MONOFILAMENT
Courbe, titane, corps plat

A6-5130

MONOFILAMENT TYING FORCEPS
Very delicate smooth jaws with long platform for 9-0 to 11-0 sutures
Curved, flat handle, titanium

A6-5130



PINCE COLIBRI
Pour enlever les fils

A6-5150

COLIBRI FORCEPS
For suture removal, pointed tips

A6-5150



PINCE D'ELSMIG A DROIT SUPERIEUR
1 x 2 dents, droite

A6-6000

ELSMIG SUPERIOR RECTUS FORCEPS
1 x 2 teeth, straight

A6-6000



PINCE D'ELSMIG A DROIT SUPERIEUR
Courbe

A6-6010

ELSMIG SUPERIOR RECTUS FORCEPS
Curved

A6-6010



PINCE A FIXER DE GREEN
10 mm

A6-6210

GREEN FIXATION FORCEPS
10 mm

A6-6210




PINCE DE BONN
1 x 2 dents, 0,12 mm
Avec micro plateaux, 7 cm

A6-7100

BONN FORCEPS
1 x 2 teeth, 0.12 mm
With tying platforms, 7 cm

A6-7100

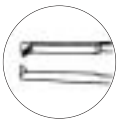


PINCE DE BONN
10 cm

A6-7110

BONN FORCEPS
10 cm

A6-7110

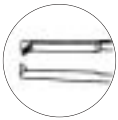


PINCE DE BONN
1 x 2 dents, 0,12 mm
Avec micro plateaux, titane, corps rond

BONN FORCEPS
1 x 2 teeth, 0.12 mm
With tying platform, titanium

A6-7130

A6-7130

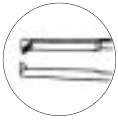

PINCE DE BONN
1 x 2 dents, 0,12 mm
Avec micro plateaux, titane, corps plat

BONN FORCEPS
1 x 2 teeth, 0.12 mm
With tying platform, flat handle, titanium

A6-7140

A6-7140



PINCE DE BARRAQUER COLIBRI
Micro plateaux, 1 x 2 dents 0,12 mm
Angulées à 90°

BARRAQUER COLIBRI FORCEPS
With tying platform, 1 x 2 teeth, 0.12 mm
Angled at 90°

A6-7200

A6-7200



PINCE DE BARRAQUER COLIBRI
Micro plateaux, 1 x 2 dents 0,12 mm
Angulées à 120°

BARRAQUER COLIBRI FORCEPS
With tying platform, 1 x 2 teeth, 0.12 mm
Angled at 120°

A6-7210

A6-7210




PINCE DE BARRAQUER COLIBRI
Micro-plateaux, 1 x 2 dents 0,12 mm
angulées à 90°, titane

BARRAQUER COLIBRI FORCEPS
With tying platform, 1 x 2 teeth, 0.12 mm,
angled at 90°, titanium

A6-7220

A6-7220

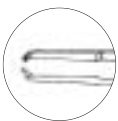


PINCE DE PAUFIQUE
Dents 0,5 mm

PAUFIQUE FORCEPS
0.5 mm teeth

A6-8000

A6-8000

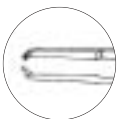

PINCE A SUTURES DE CASTROVIEJO
1 x 2 dents

CASTROVIEJO SUTURING FORCEPS
1 x 2 teeth

0,12 mm A6-8012
0,30 mm A6-8030
0,50 mm A6-8050

0.12 mm A6-8012
0.30 mm A6-8030
0.50 mm A6-8050




PINCE DE CORNIC
Pour l'implant, le monofilament et la capsule

CORNIC FORCEPS
Monofilament forceps for lens implant and capsule

A6-9000

A6-9000

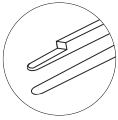

PINCE DE ARON-ROSA II
Pour poser la LIO

ARON-ROSA II FORCEPS
Modified posterior chamber IOL forceps

A6-9130

A6-9130



PINCE A SAISIR LES IMPLANTS SOUPLES

GRASPING FOLDABLE LENS FORCEPS

A6-9160

A6-9160



PINCE DE MAC DONALD FINE

McDONALD FOLDABLE FORCEPS
With very fine jaws

A6-9165

A6-9165



PINCE DE MAC DONALD II

McDONALD II FOLDABLE FORCEPS

A6-9170

A6-9170



PINCE DE SALZ
Pour casser le noyau pendant la phacoémulsification, titane

SALZ NUCLEUS SPLITTER
*Nucleus splitter
Titanium*

A6-9175

A6-9175




PINCE «PICK-UP AND FOLD»
Pour saisir et plier l'implant souple, titane

PICK-UP AND FOLD FORCEPS
To pick-up and fold the foldable lens, titanium

A6-9180

A6-9180

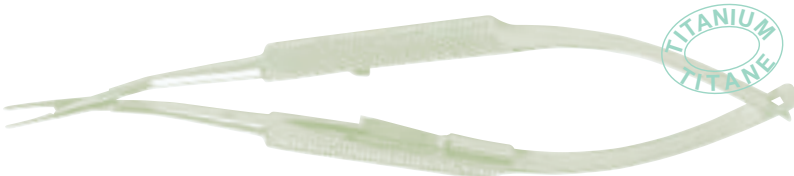

PINCE DE FINE
Pour prendre l'implant souple plié dans la pince «Pick-up and fold» et le poser à travers la petite incision, titane


FINE FORCEPS
To grasp the folded optic and insert through the small incision, Titanium

A6-9185

A6-9185

PORTE-AIGUILLE DE CASTROVIEJO
Gros mors 15 cm

CASTROVIEJO NEEDLE HOLDER
Standard jaws, 15 cm

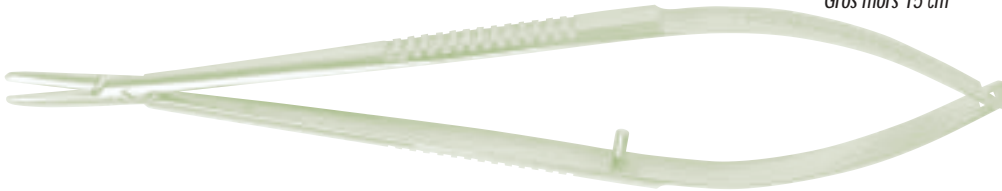

Droit A7-1000


Straight A7-1000

Courbe A7-1010

Curved A7-1010

PORTE-AIGUILLE DE CASTROVIEJO
Mors fins, 15 cm

CASTROVIEJO NEEDLE HOLDER
Delicate jaws, 15 cm

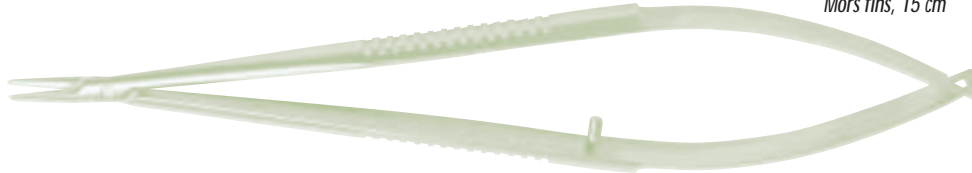

Droit A7-1100


Straight A7-1100

Courbe A7-1110

Curved A7-1110

PORTE-AIGUILLE DE CASTROVIEJO A ARRET
Mors fins, 15 cm

CASTROVIEJO NEEDLE HOLDER WITH LOCK
Delicate jaws, 15 cm

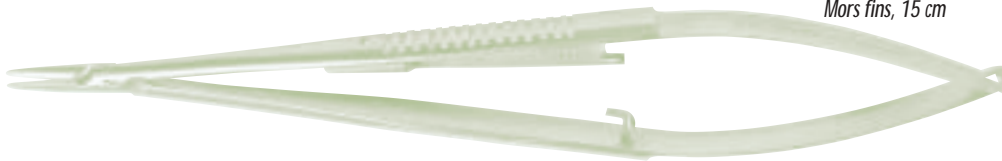

Droit A7-1120

Straight A7-1120

Courbe A7-1130

Curved A7-1130


PORTE-AIGUILLE GROS MANCHE

NEEDLE HOLDER LARGE HANDLE

A7-1200

A7-1200



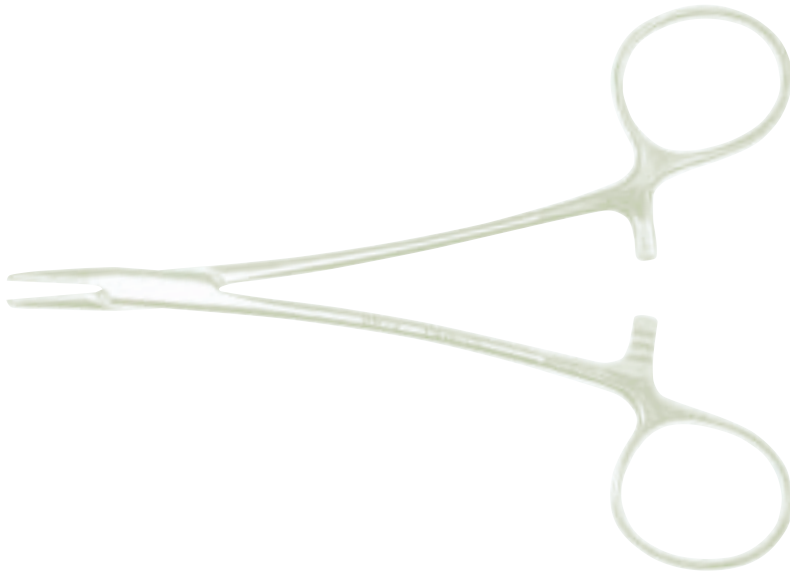


PORTE-AIGUILLE DE HALSEY
Mors tungstène

HALSEY NEEDLE HOLDER
Tungstene jaws

A7-1400

A7-1400

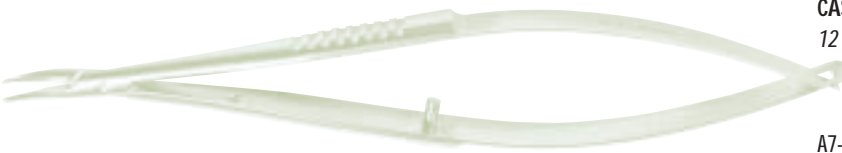


MICRO PORTE-AIGUILLE DE CASTROVIEJO
12 cm, courbe

CASTROVIEJO NEEDLE HOLDER
12 cm long, very delicate jaws, curved

A7-2010

A7-2010

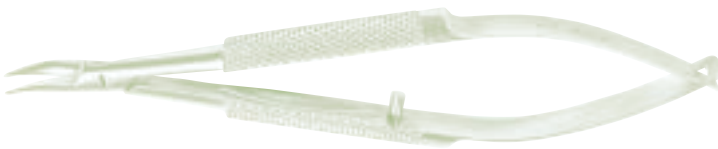


MICRO PORTE-AIGUILLE DE BARRAQUER TROUTMAN
*10 cm, mors très fins
Courbe*

BARRAQUER TROUTMAN NEEDLE HOLDER
*Short model, extra delicate jaws
Curved*

A7-3010

A7-3010

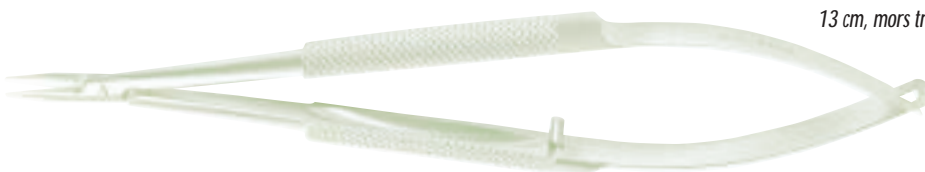

PORTE-AIGUILLE DE BARRAQUER
13 cm, mors très fins

BARRAQUER NEEDLE HOLDER
13 cm, extra delicate jaws




Droit A7-3100

Straight A7-3100

Courbe A7-3110

Curved A7-3110

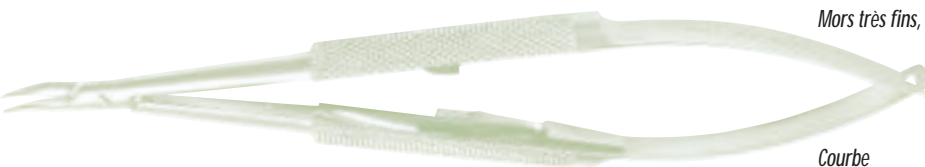

PORTE-AIGUILLE DE BARRAQUER A ARRET
Mors très fins, 13 cm

BARRAQUER NEEDLE HOLDER WITH LOCK
Extra delicate jaws, 13 cm


Courbe A7-3130

Curved A7-3130



MICRO PORTE-AIGUILLE DE CORNIC
 13 cm, micro-mors becs dégagés

CORNIC NEEDLE HOLDER
 Curved, 13 cm, extremely delicate jaws at the tip

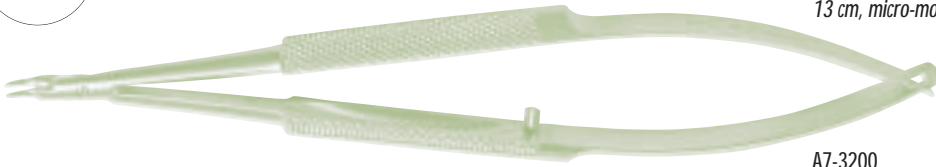


A7-3200

A7-3200




MICRO PORTE-AIGUILLE DE CORNIC
 13 cm, micro-mors becs dégagés, titane

CORNIC NEEDLE HOLDER
 Curved, 13 cm, extremely delicate jaws at the tip
 Titanium

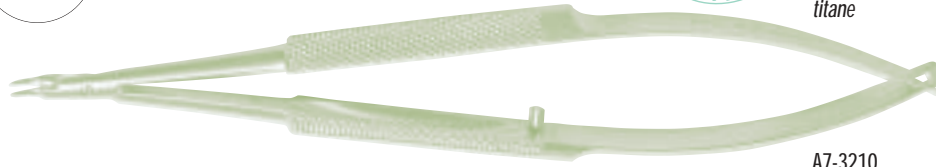

A7-3210

A7-3210

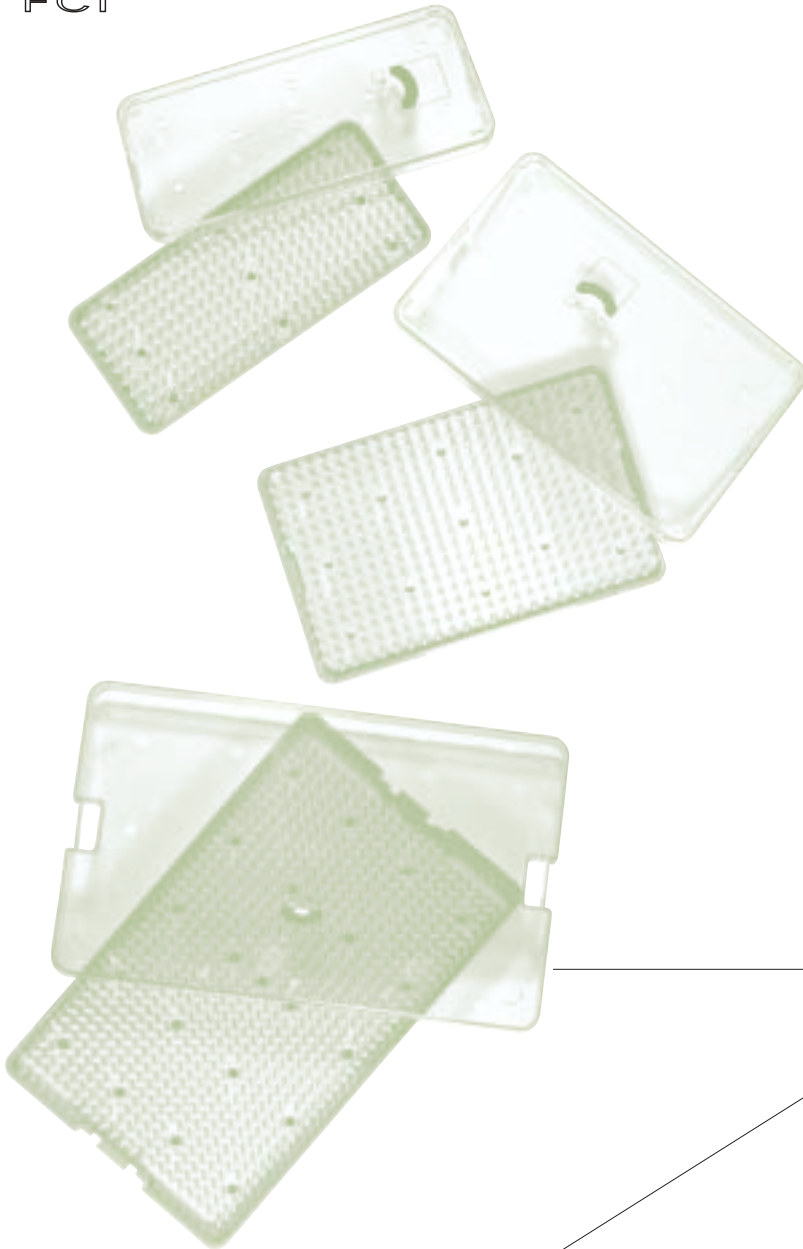

BOITES PLASTIQUE
Pour autoclave

160 x 70 x 20 mm

A8-3000

STERILIZING TRAY

Autoclavable plastic with silicone mat

160 x 70 x 20 mm

A8-3000

170 x 108 x 20 mm

A8-3003

170 x 108 x 20 mm

A8-3003

260 x 160 x 20 mm

A8-3005

260 x 160 x 20 mm

A8-3005

BOITES PLASTIQUE

Pour autoclave, deux niveaux

260 x 160 x 40 mm

A8-3010

STERILIZING TRAY

Autoclavable plastic with silicone mats

Two levels

260 x 160 x 40 mm

A8-3010

280 x 240 x 40 mm

A8-3020

280 x 240 x 40 mm

A8-3020



STYLET DILATATEUR DE SICHEL
WILDER

SICHEL WILDER LACRIMAL
DILATOR



<i>Fin</i>	A8-4000	<i>Fine taper</i>	A8-4000
<i>Moyen</i>	A8-4010	<i>Medium taper</i>	A8-4010
<i>Fort</i>	A8-4020	<i>Heavy taper</i>	A8-4020

STYLET DILATATEUR DOUBLE


DOUBLE-END LACRIMAL
DILATOR



A8-4050	A8-4050
---------	---------

SONDE DE GALEZOWSKI

GALEZOWSKI LACRIMAL
PROBE

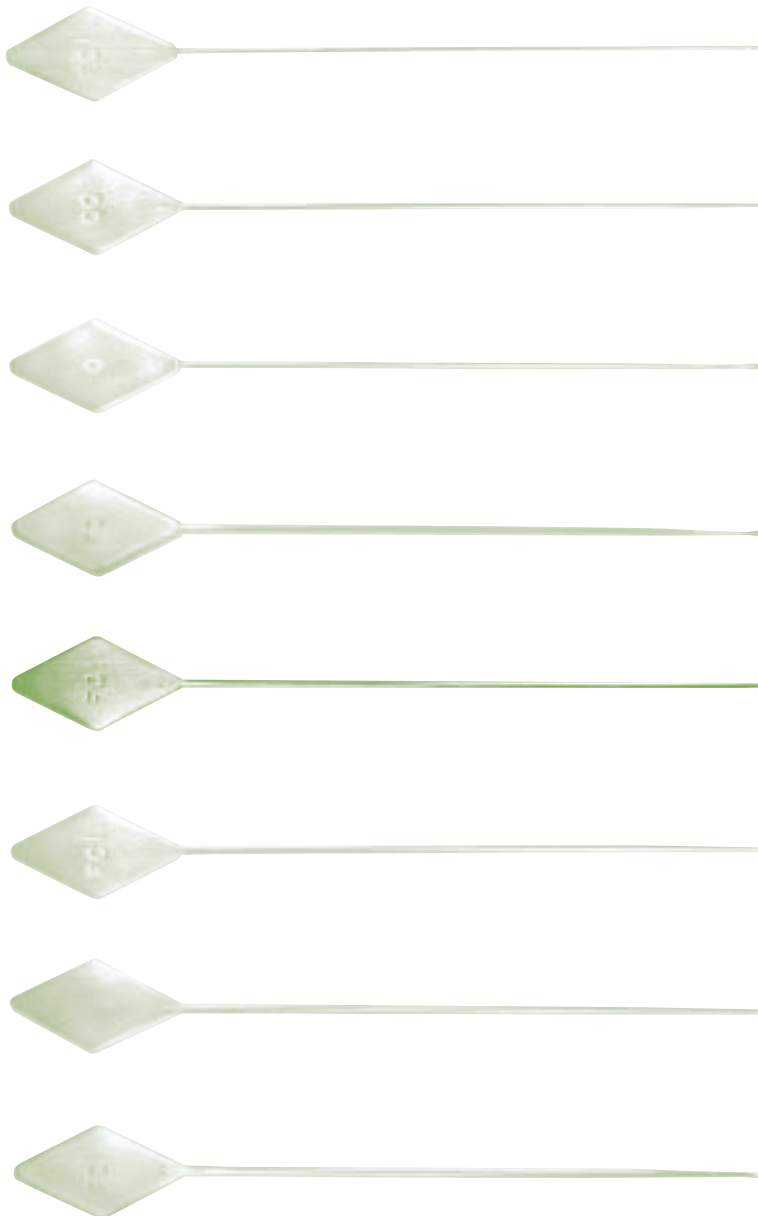

000	A8-4110	000	A8-4110
00	A8-4120	00	A8-4120
0	A8-4130	0	A8-4130
1	A8-4140	1	A8-4140
2	A8-4150	2	A8-4150
3	A8-4160	3	A8-4160
4	A8-4170	4	A8-4170
5	A8-4180	5	A8-4180



RONGEUR DE KERRISON

**KERRISON BONE NIBBLING
RONGEUR**

A9-1000

A9-1000


ECARTEUR DE KNAPP
4 griffes mousses

KNAPP LACRIMAL RETRACTOR
4-prong, blunt



A9-2100

A9-2100

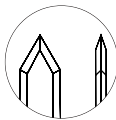

**COUTEAU DIAMANT 3 CRANS
«CLEAR CORNEA» DROIT**
Pointe à 60°
Largeur : 3,1 mm
Longueur : 5,5 mm, 0,6 mm et 0,3 mm
Epaisseur : 0,17 mm

**3 STEPS DIAMOND KNIFE
«CLEAR CORNEA» STRAIGHT**
60° tip
Wide: 3,1 mm
Length: 5.5 mm, 0.6 mm et 0.3 mm
Thickness: 0.17 mm



4-1317

4-1317




**COUTEAU DIAMANT
«SCLERAL POCKET» ANGULÉ**
9 facettes
Largeur : 2,0 mm
Longueur : 4,0 mm
Epaisseur : 0,17 mm

**DIAMOND KNIFE «SCLERAL
POCKET» ANGLED**
Crescent shaped blade designed for scler-
al pocket incision
Wide: 2.0 mm
Length: 4.0 mm
Thickness: 0.17 mm



4-1389

4-1389

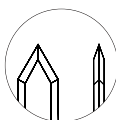

**COUTEAU DIAMANT
«CLEAR CORNEA» COUDÉ**
Pointe à 60°
Largeur : 3,0 mm
Longueur : 5,5 mm
Epaisseur : 0,17 mm

**DIAMOND KNIFE «CLEAR
CORNEA» ANGLED**
60° tip
Wide: 3.0 mm
Length: 5.5 mm
Thickness: 0.17 mm



4-1525

4-1525



COUTEAU POUR KR
Double tranchant

**RK DIAMOND MICROMETER
KNIFE**
Double cutting edge (vertical and 45°)



4-1334

4-1334



PLAQUE DE HUCO KREMER
Pour vérifier la profondeur de lame

HUCO KREMER BLADE GAUGE
To verify micrometer blade depth

4-6895

4-6895

A

ADSON, PINCE D'ADSON	20
ADSON-BROWN, PINCE D'ADSON-BROWN	20
AIGUILLE A CORPS ETRANGERS	3
ANNEAU DE FIXATION SCLERALE	13
ANSE DE SNELLEN	7
ANSE IRRIGATRICE DE PEARCE	7
ARNEODO, MANIPULATEUR D'ARNEODO	7
ARON-ROSA, PINCE D'ARON-ROSA II	24
ARRUGA, CROCHET D'ARRUGA	6
ASTI DISC	8

B

BARRAQUER, CANULE DE BARRAQUER	16
BARRAQUER, CISEAUX A IRIDECTOMIE DE BARRAQUER	11
BARRAQUER, PINCE A CILS DE BARRAQUER	20
BARRAQUER, PORTE-AIGUILLE DE BARRAQUER	26
BARRAQUER, SPATULE DE BARRAQUER	5
BARRAQUER-COLIBRI, BLEPHAROSTAT DE BARRAQUER-COLIBRI	1
BARRAQUER-COLIBRI, PINCE DE BARRAQUER-COLIBRI	23
BARRAQUER-TROUTMAN, MICRO PORTE-AIGUILLE DE BARRAQUER	26
BERNARD, CURETTE A VOIE LACRYMALE DE J.A. BERNARD	4
BINKHORST, CANULE AMOVIBLE DE BINKHORST	18
BINKHORST, CANULE DE BINKHORST	13
BISECTEUR DE TEYSSIER	5
BLEPHAROSTAT DE BARRAQUER-COLIBRI	1
BLEPHAROSTAT DE CASTROVIEJO	2
BLEPHAROSTAT DE CORCELLE	1
BLEPHAROSTAT DE PLEY	1
BLEPHAROSTAT POUR PHACO	1
BOITES DE STERILISATION	28
BONN, CISEAUX DE BONN	9
BONN, ECARTEUR DE BONN	2
BONN, MICRO-CROCHET A IRIS DE BONN	6
BONN, PINCE DE BONN	22,23

C

CANULE AMOVIBLE COUDEE A 45°	18
CANULE AMOVIBLE COUDEE A 90°	18
CANULE AMOVIBLE COURBE	18
CANULE AMOVIBLE DE BINKHORST	18
CANULE AMOVIBLE DROITE	18
CANULE COUDEE A 45° POUR MANCHE A5-9200	18
CANULE COUDEE A 90° POUR MANCHE A5-9200	18
CANULE CROSSE D'EVEQUE POUR MANCHE A5-9200	18
CANULE DE BARRAQUER	16
CANULE DE BINKHORST	13
CANULE DE CHARLEUX	13,16
CANULE DE CHARLEUX GRATTEUSE	16
CANULE DE CHAZALON	15
CANULE DE GALEZOWSKI	16
CANULE DE GASTAUD MOYENNE	17
CANULE DE GASTAUD II	17
CANULE DE GASTAUD III LONGUE	17
CANULE DE GUERIN	14
CANULE DE KRATZ GRATTEUSE	16
CANULE DE RYCROFT	16
CANULE DE SIMCOE	13
CANULE D'IRRIGATION	14
CANULE DOUBLE COURANT DE SIMCOE INVERSEE	15
CANULE DOUBLE COURANT DE SIMCOE ORIGINALE	15
CANULE DROITE POUR MANCHE A5-9200	18
CANULE GRATTEUSE	16
CANULE POUR HYDRODISSECTION	15
CANULE POUR LE HEALON	15
CANULE THX	14
CANULE THX CLUB DE GOLF	15
CANULE THX GRATTEUSE	16
CANULE THX-LAFORGE	15
CANULE THX-TEYSSIER	14
CANULE THX-TURUT	14
CASTROVIEJO, BLEPHAROSTAT DE CASTROVIEJO	2
CASTROVIEJO, CISEAUX DE CASTROVIEJO	11
CASTROVIEJO, COMPAS DE CASTROVIEJO	8
CASTROVIEJO, MICRO PORTE-AIGUILLE DE CASTROVIEJO	26
CASTROVIEJO, PINCE A SUTURES DE CASTROVIEJO	23
CASTROVIEJO, PORTE-AIGUILLE DE CASTROVIEJO	25
CHARLEUX, CANULE DE CHARLEUX	13,16
CHARLEUX, CANULE GRATTEUSE DE CHARLEUX	16
CHAZALON, CANULE DE CHAZALON	15
CHOPPER	7
CISEAUX A CAPSULE DE CORNIC	12
CISEAUX A CAPSULE DE GALAND	12
CISEAUX A CAPSULE DE LAFORGE-CORNIC	12
CISEAUX A CAPSULE DE LESCURE-GALAND	12
CISEAUX A ENUCLEATION	10
CISEAUX A IRIDECTOMIE DE BARRAQUER	11

CISEAUX A IRIDECTOMIE DE WECKER	10
CISEAUX DE BONN	9
CISEAUX DE CASTROVIEJO	11
CISEAUX DE KATZIN	11
CISEAUX DE SEVRIN-STEVENS	10
CISEAUX DE VANNAS	12
CISEAUX DE WESTCOTT	11
CISEAUX D'OPHTHALMOLOGIE	9
CISEAUX, MICRO CISEAUX DE VANNAS	12
CLEAR CORNEA, COUTEAU DIAMANT CLEAR CORNEA	31
COLIBRI, PINCE COLIBRI	22
COMPAS DE CASTROVIEJO	8
COQUE EN PLASTIQUE	8
CORCELLE, BLEPHAROSTAT DE CORCELLE	1
CORNIC, CISEAUX A CAPSULE DE CORNIC	12
CORNIC, MICRO PORTE-AIGUILLE DE CORNIC	27
CORNIC, PINCE DE CORNIC	23
CORNIC, SPATULE DE CORNIC	5
CORYDON, PINCE DE CORYDON	19
COUTEAU CLIVEUR DE PAUFIQUE	3
COUTEAU DIAMANT DE HUCO	31
COUTEAU POUR KR	31
CROCHET A DR	5
CROCHET A STRABISME DE GRAEFE	5
CROCHET BOUTON DE COL	6
CROCHET D'ARRUGA	6
CROCHET DE GASS ROUCHY	5
CROCHET DE GILLIES	6
CROCHET DE JAFFE BECHERT	7
CROCHET DE LESTER	7
CROCHET DE SINSKEY	6
CROCHET DE SINSKEY-CORNIC	6
CROCHET, MICRO CROCHET A IRIS DE BONN	6
CULLER, SPATULE A IRIS DE CULLER	5
CURETTE A CHALAZION DE MEYERHOEFFER	4
CURETTE A EVISCERATION	4
CURETTE A VOIE LACRYMALE DE J.A. BERNARD	4

D

DESMARRES, PINCE A CHALAZION DE DESMARRES	20
DESMARRES, RELEVEUR A PAUPIERES DE DESMARRES	2

E

ECARTEUR DE BONN	2
ECARTEUR DE KNAPP	30
ELSCHNIG, PINCE D'ELSCHNIG A DROIT SUPERIEUR	22

F

FINE, PINCE DE FINE	24
---------------------	----

G

GALAND, CISEAUX A CAPSULE DE GALAND	12
GALEZOWSKI, CANULE DE GALEZOWSKI	16
GALEZOWSKI, SONDE DE GALEZOWSKI	29
GASS-ROUCHY, CROCHET DE GASS-ROUCHY	5
GASTAUD, CANULE DE GASTAUD II	17
GASTAUD, CANULE DE GASTAUD III LONGUE	17
GASTAUD, CANULE DE GASTAUD MOYENNE	17
GILLIES, CROCHET DE GILLIES	6
GRAEFE, CROCHET A STRABISME DE GRAEFE	5
GREEN, PINCE A FIXER DE GREEN	22
GUERIN, CANULE DE GUERIN	14

H

HALSEY, PORTE-AIGUILLE DE HALSEY	26
HALSTED, PINCE DE HALSTED	21
HARMS-TUBINGEN, PINCE DE HARMS-TUBINGEN	21
HEALON, CANULE POUR LE HEALON	15
HOFFER, MARQUEUR OPTIQUE DE HOFFER	13
HUCO, COUTEAU DIAMANT 3 CRANS	31
HUCO, COUTEAU POUR KR	31
HUCO-KREMER, PLAQUE DE HUCO-KREMER	31
HYDRODISSECTION, CANULE POUR HYDRODISSECTION	15

J

JAEGER, PLAQUE A PAUPIERES DE JAEGER	2
JAFFE-BECHERT, CROCHET DE JAFFE BECHERT	7

K

KATZIN, CISEAUX DE KATZIN	11
KELLER, MANCHE PORTE-CANULE DE KELLER	17
KELLER, MANCHETTE DE KELLER	17
KELMAN MAC PHERSON, PINCE DE KELMAN MAC PHERSON	19
KERRISON, RONGEUR DE KERRISON	30
KNAPP, ECARTEUR DE KNAPP	30
KRATZ, CANULE GRATTEUSE DE KRATZ	16

L

LAFORGE, CANULE THX-LAFORGE	15
LAFORGE-CORNIC, CISEAUX A CAPSULE DE LAFORGE-CORNIC	12
LAME BISTOURI N° 11	3
LAMES DE RASOIR	3
LEBUISSON, MANIPULATEUR DE LEBUISSON	7
LESCURE-GALAND, CISEAUX A CAPSULE DE LESCURE-GALAND	12
LESTER, CROCHET DE LESTER	7

M

MAC DONALD, PINCE DE MAC DONALD FINE	24
MAC DONALD, PINCE DE MAC DONALD II	24
MANCHE BISTOURI N° 3	3
MANCHE I/A FCI	18
MANCHE I/A POUR CANULES AMOVIBLES	18
MANCHE PORTE-CANULE DE KELLER	17
MANCHE PORTE-CANULE POUR CANULES INTERCHANGEABLES	18
MANCHETTE DE KELLER	17
MANIPULATEUR D'ARNEODO	7
MANIPULATEUR DE LEBUISSON	7
MARQUEUR OPTIQUE DE HOFFER	13
MARQUEUR POUR LE DR	8
MEYERHOEFER, CURETTE A CHALAZION DE MEYERHOEFER	4
MICRO PORTE-AIGUILLE DE BARRAQUER-TROUTMAN	26
MICRO PORTE-AIGUILLE DE CASTROVIEJO	26
MICRO PORTE-AIGUILLE DE CORNIC	27
MONOFILAMENT, PINCE A MONOFILAMENT TROUTMAN	21,22

P

PAUFIQUE, COUTEAU CLIVEUR DE PAUFIQUE	3
PAUFIQUE, PINCE DE PAUFIQUE	23
PEARCE, ANSE IRRIGATRICE DE PEARCE	7
PICK-UP AND FOLD, PINCE "PICK-UP AND FOLD"	24
PINCE "PICK UP AND FOLD"	24
PINCE A CHALAZION DE DESMARRES	20
PINCE A CHAMPS	21
PINCE A CILS BARRAQUER	20
PINCE A DISSEQUER	20
PINCE A FIXER DE GREEN	22
PINCE A MONOFILAMENT	22
PINCE A MONOFILAMENT TROUTMAN	21,22
PINCE A SAISIR LES IMPLANTS SOUPLES	24
PINCE A SUTURES DE CASTROVIEJO	23
PINCE COLIBRI	22
PINCE D'ADSON	20
PINCE D'ADSON BROWN	20
PINCE D'ARON ROSA II	24
PINCE DE BARRAQUER-COLIBRI	23
PINCE DE BONN	22,23
PINCE DE CORNIC	23
PINCE DE CORYDON	19
PINCE D'ELSCHNIG A DROIT SUPERIEUR	22
PINCE DE FINE	24
PINCE DE HALSTED	21
PINCE DE HARMS-TUBINGEN	21
PINCE DE KELMAN MAC PHERSON	19
PINCE DE MAC DONALD FINE	24
PINCE DE MAC DONALD II	24
PINCE DE PAUFIQUE	23
PINCE DE SALZ	24
PINCE D'UTRATA	19

PINCE D'UTRATA COURBE	19
PINCE PUCE	21
PLAQUE A PAUPIERES DE JAEGER	2
PLAQUE DE HUCO-KREMER	31
PLEY, BLEPHAROSTAT DE PLEY	1
PORTE-AIGUILLE DE BARRAQUER	26
PORTE-AIGUILLE DE CASTROVIEJO	25
PORTE-AIGUILLE DE HALSEY	26
PORTE-AIGUILLE GROS MANCHE	25
PORTE-LAME DE TROUTMAN	3

R

RACCORD MALE-MALE	14
RELEVEUR A PAUPIERES DE DESMARRES	2
RONGEUR DE KERRISON	30
RYCROFT, CANULE DE RYCROFT	16

S

SALZ, PINCE DE SALZ	24
SCLERAL POCKET, COUTEAU DIAMANT SCLERAL POCKET	31
SERINGUE	8
SEVRIN-STEVENSON, CISEAUX DE SEVRIN-STEVENSON	10
SICHEL-WILDER, STYLET DILATATEUR DE SICHEL-WILDER	29
SIMCOE, CANULE DE SIMCOE	13
SIMCOE, CANULE DOUBLE COURANT DE SIMCOE INVERSEE	15
SIMCOE, CANULE DOUBLE COURANT DE SIMCOE ORIGINALE	15
SINSKEY, CROCHET DE SINSKEY	6
SINSKEY-CORNIC, CROCHET DE SINSKEY-CORNIC	6
SNELLEN, ANSE DE SNELLEN	7
SONDE DE GALEZOWSKI	29
SPATULE A IRIS DE CULLER	5
SPATULE DE BARRAQUER	5
SPATULE DE CORNIC	5
STYLET DILATATEUR DE SICHEL-WILDER	29
STYLET DILATATEUR DOUBLE	29

T

TEYSSIER, BISECTEUR DE TEYSSIER	5
TEYSSIER, CANULE THX-TEYSSIER	14
THX, CANULE THX	14
THX, CANULE THX GRATTEUSE	16
THX-CLUB DE GOLF, CANULE THX CLUB DE GOLF	15
THX-LAFORGE, CANULE THX-LAFORGE	15
THX-TEYSSIER, CANULE THX-TEYSSIER	14
THX-TURUT, CANULE THX-TURUT	14
TREPAN MODELE FCI	4
TROUTMAN, PINCE A MONOFILAMENT DE TROUTMAN	21,22
TROUTMAN, PORTE-LAME DE TROUTMAN	3
TUBE SILICONE	15

U

UTRATA, PINCE D'UTRATA	19
UTRATA, PINCE D'UTRATA COURBE	19

V

VANNAS, CISEAUX DE VANNAS	12
VANNAS, MICRO-CISEAUX DE VANNAS	12

W

WECKER, CISEAUX A IRIDECTOMIE DE WECKER	10
WESTCOTT, CISEAUX DE WESTCOTT	11

A

ABRASIVE, ABRASIVE CANNULA 16
 ABRASIVE, CHARLEUX ABRASIVE CANNULA 16
 ABRASIVE, KRATZ ABRASIVE CANNULA 16
 ABRASIVE, THX ABRASIVE CANNULA 16
 ADSON, ADSON TISSUE FORCEPS 20
 ADSON BROWN, ADSON BROWN FORCEPS 20
 ARNEODO, ARNEODO MICRO MANIPULATOR 7
 ARON-ROSA, ARON-ROSA II FORCEPS 24
 ARRUGA, ARRUGA HOOK 6
 ASTI-DISC 8

B

BARRAQUER, BARRAQUER CANNULA 16
 BARRAQUER, BARRAQUER CILIA FORCEPS 20
 BARRAQUER, BARRAQUER IRIS SCISSORS 11
 BARRAQUER, BARRAQUER NEEDLE HOLDER 26
 BARRAQUER, BARRAQUER SPATULA 5
 BARRAQUER, BARRAQUER WIRE SPECULUM 1
 BARRAQUER COLIBRI, BARRAQUER COLIBRI FORCEPS 23
 BARRAQUER TROUTMAN, BARRAQUER TROUTMAN NEEDLE HOLDER 26
 BERNARD, J.A. BERNARD LACRIMAL CURETTE 4
 BINKHORST, BINKHORST CANNULA 13
 BISECTOR, TEYSSIER NUCLEUS BISECTOR 5
 BLADE BREAKER, TROUTMAN BLADE BREAKER AND HOLDER 3
 BONN, BONN FORCEPS 22,23
 BONN, BONN MICRO IRIS HOOK 6
 BONN, BONN RETRACTOR 2
 BONN, BONN SCISSORS 9

C

CALIPER, CASTROVIEJO CALIPER 8
 CANNULA, ABRASIVE CANNULA 16
 CANNULA, BARRAQUER CANNULA 16
 CANNULA, BINKHORST CANNULA 13
 CANNULA, CHARLEUX ABRASIVE CANNULA 16
 CANNULA, CHARLEUX CANNULA 13
 CANNULA, CHAZALON CANNULA 15
 CANNULA, GALEZOWSKI CANNULA 16
 CANNULA, GASTAUD II CANNULA 14
 CANNULA, GUERIN CANNULA 17
 CANNULA, HEALON CANNULA 15
 CANNULA, HYDRO-DISSECTION CANNULA 15
 CANNULA, IRRIGATING CANNULA 14
 CANNULA, KRATZ ABRASIVE CANNULA 16
 CANNULA, LAForge THX CANNULA 15
 CANNULA, LONG GASTAUD III CANNULA 17
 CANNULA, MEDIUM GASTAUD CANNULA 17
 CANNULA, ORIGINAL SIMCOE I/A CANNULA 15
 CANNULA, PEARCE IRRIGATING CANNULA 7
 CANNULA, REVERSED SIMCOE I/A CANNULA 15
 CANNULA, RYCROFT AIR CANNULA 16
 CANNULA, SIMCOE CANNULA 13
 CANNULA, THX ABRASIVE CANNULA 16
 CANNULA, THX CLUB DE GOLF I/A CANNULA 15
 CANNULA, THX I/A CANNULA 14
 CANNULA, THX TEYSSIER I/A CANNULA 14
 CANNULA, THX TURUT I/A CANNULA 14
 CASTROVIEJO, CASTROVIEJO CALIPER 8
 CASTROVIEJO, CASTROVIEJO EYE SPECULUM 2
 CASTROVIEJO, CASTROVIEJO NEEDLE HOLDER 25,26
 CASTROVIEJO, CASTROVIEJO SCISSORS 11
 CASTROVIEJO, CASTROVIEJO SUTURING FORCEPS 23
 CHALAZION FORCEPS, DESMARRES CHALAZION FORCEPS 20
 CHARLEUX, CHARLEUX ABRASIVE CANNULA 16
 CHARLEUX, CHARLEUX CANNULA 13
 CHAZALON, CHAZALON CANNULA 15
 CHOP, PHACO CHOP 7
 CILIA FORCEPS, BARRAQUER CILIA FORCEPS 20
 CLEAR CORNEA, DIAMOND KNIFE "CLEAR CORNEA" 31
 COLIBRI, COLIBRI FORCEPS 22
 COLLAR BUTTON, COLLAR BUTTON HOOK 6
 CONNECTOR, MALE-MALE CONNECTOR 14
 CORCELLE, CORCELLE EYE SPECULUM 1
 CORNIC, CORNIC CAPSULOTOMY SCISSORS 12
 CORNIC, CORNIC FORCEPS 23
 CORNIC, CORNIC NEEDLE HOLDER 27
 CORNIC, CORNIC NUCLEUS VECTIS 5
 CORYDON, CORYDON FORCEPS 19
 CULLER, CULLER IRIS SPATULA 5
 CURETTE, J.A. BERNARD LACRIMAL CURETTE 4
 CURETTE, MEYERHOEFER CHALAZION CURETTE 4

D

DESMARRES, DESMARRES CHALAZION FORCEPS 20
 DESMARRES, DESMARRES LID RETRACTOR 2

DIAMOND KNIFE, 3 STEPS DIAMOND KNIFE 31
 DIAMOND KNIFE, DIAMOND KNIFE "CLEAR CORNEA" 31
 DIAMOND KNIFE, DIAMOND KNIFE "SCLERAL POCKET" 31
 DIAMOND KNIFE, RK DIAMOND MICROMETER KNIFE 31
 DILATOR, DOUBLE END LACRIMAL DILATOR 29
 DILATOR, SICHEL WILDER LACRIMAL DILATOR 29
 DRESSING, DRESSING FORCEPS 20

E

ELSCHNIG, ELSCHNIG SUPERIOR RECTUS FORCEPS 22
 ENUCLEATION, ENUCLEATION SCISSORS 10
 EVISCERATION SPOON 4

F

FINE, FINE FORCEPS 24
 FOLDABLE LENS, GRASPING FOLDABLE LENS FORCEPS 24
 FORCEPS, ADSON BROWN FORCEPS 20
 FORCEPS, ADSON TISSUE FORCEPS 20
 FORCEPS, ARON-ROSA II FORCEPS 24
 FORCEPS, BARRAQUER CILIA FORCEPS 20
 FORCEPS, BARRAQUER COLIBRI FORCEPS 23
 FORCEPS, BONN FORCEPS 22,23
 FORCEPS, CASTROVIEJO SUTURING FORCEPS 23
 FORCEPS, COLIBRI FORCEPS 22
 FORCEPS, CORNIC FORCEPS 23
 FORCEPS, CORYDON FORCEPS 19
 FORCEPS, CURVED UTRATA FORCEPS 19
 FORCEPS, DEMARRES CHALAZION FORCEPS 20
 FORCEPS, DRESSING FORCEPS 20
 FORCEPS, ELSCHNIG SUPERIOR RECTUS FORCEPS 22
 FORCEPS, FINE FORCEPS 24
 FORCEPS, GRASPING FOLDABLE LENS FORCEPS 24
 FORCEPS, GREEN FIXATION FORCEPS 22
 FORCEPS, HALSTED MOSQUITO FORCEPS 21
 FORCEPS, HARMS TUBINGEN FORCEPS 21
 FORCEPS, KELMAN McPHERSON FORCEPS 19
 FORCEPS, McDONALD FOLDABLE FORCEPS 24
 FORCEPS, McDONALD II FOLDABLE FORCEPS 24
 FORCEPS, MONOFILAMENT TYING FORCEPS 22
 FORCEPS, PAUFIQUE FORCEPS 23
 FORCEPS, PICK-UP AND FOLD FORCEPS 24
 FORCEPS, TISSUE FORCEPS 20
 FORCEPS, TROUTMAN TYING FORCEPS 21,22
 FORCEPS, UTRATA FORCEPS 19
 FOREIGN BODY SPUD 3

G

GALAND, GALAND CAPSULOTOMY SCISSORS 12
 GALEZOWSKI, GALEZOWSKI CANNULA 16
 GALEZOWSKI, GALEZOWSKI LACRIMAL PROBE 29
 GASS ROUCHY, GASS ROUCHY HOOK 5
 GASTAUD, GASTAUD II CANNULA 17
 GASTAUD, LONG GASTAUD III CANNULA 17
 GASTAUD, MEDIUM GASTAUD CANNULA 17
 GAUGE, HUCO KREMER BLADE GAUGE 31
 GILLIES, GILLIES LID HOOK 6
 GRAEFE, GRAEFE MUSCLE HOOK 5
 GREEN, GREEN FIXATION FORCEPS 22
 GUERIN, GUERIN CANNULA 14

H

HALSEY, HALSEY NEEDLE HOLDER 26
 HALSTED, HALSTED MOSQUITO FORCEPS 21
 HANDLE, KELLER CANNULA HANDLE 17
 HANDLE, SHORT KELLER CANNULA HANDLE 17
 HANDPIECE, FCI I/A HANDPIECE 18
 HANDPIECE, UNIVERSAL I/A HANDPIECE 18
 HARMS TUBINGEN, HARMS TUBINGEN FORCEPS 21
 HEALON, HEALON CANNULA 15
 HOFFER, HOFFER OPTIC ZONE MARKER 13
 HOOK, ARRUGA HOOK 6
 HOOK, BONN MICRO IRIS HOOK 6
 HOOK, COLLAR BUTTON HOOK 6
 HOOK, GASS ROUCHY HOOK 5
 HOOK, GILLIES LID HOOK 6
 HOOK, GRAEFE MUSCLE HOOK 5
 HOOK, JAFFE BECHERT HOOK 7
 HOOK, RETINAL DETACHMENT HOOK 5
 HOOK, SINSKEY CORNIC HOOK 6
 HOOK, SINSKEY HOOK 6
 HUCO KREMER, HUCO KREMER BLADE GAUGE 31
 HYDRO-DISSECTION, HYDRO-DISSECTION CANNULA 15

J

JAEGER, JAEGER LID PLATE 2
 JAFFE BECHERT, JAFFE BECHERT HOOK 7

K

KATZIN, KATZIN CORNEAL TRANSPLANT SCISSORS 11
 KELLER, KELLER CANNULA HANDLE 17
 KELLER, SHORT KELLER CANNULA HANDLE 17
 KELMAN McPHERSON, KELMAN McPHERSON FORCEPS 19
 KERRISON, KERRISON BONE NIBBLING RONGEUR 30
 KNAPP, KNAPP LACRIMAL RETRACTOR 30
 KRATZ, KRATZ ABRASIVE CANNULA 16

L

LAFORGE CORNIC, LAFORGE CORNIC CAPSULOTOMY SCISSORS 12
 LAFORGE THX, LAFORGE THX CANNULA 15
 LEBUISSON, LEBUISSON MICRO MANIPULATOR 7
 LESCURE GALAND, LESCURE GALAND CAPSULOTOMY SCISSORS 12
 LESTER, LESTER IOL MANIPULATOR 7
 LID PLATE, JAEGER LID PLATE 2
 LOOP, SNELLEN LENS LOOP 7

M

MANIPULATOR, ARNEODO MICRO MANIPULATOR 7
 MANIPULATOR, LEBUISSON MICRO MANIPULATOR 7
 MANIPULATOR, LESTER IOL MANIPULATOR 7
 MARKER, HOFFER OPTIC ZONE MARKER 13
 McDONALD, McDONALD FOLDABLE FORCEPS 24
 McDONALD II, McDONALD II FOLDABLE FORCEPS 24
 MEYERHOEFER, MEYERHOEFER CHALAZION CURETTE 4
 MONOFILAMENT, MONOFILAMENT TYING FORCEPS 22
 MOSQUITO, HALSTED MOSQUITO FORCEPS 21

N

NEEDLE HOLDER, BARRAQUER NEEDLE HOLDER 26
 NEEDLE HOLDER, BARRAQUER TROUTMAN NEEDLE HOLDER 26
 NEEDLE HOLDER, CASTROVIEJO NEEDLE HOLDER 25,26
 NEEDLE HOLDER, CORNIC NEEDLE HOLDER 27
 NEEDLE HOLDER, HALSEY NEEDLE HOLDER 26
 NEEDLE HOLDER, NEEDLE HOLDER LARGE HANDLE 25

P

PARKER, PARKER BLADE # 11 3
 PARKER, PARKER HANDLE # 3 3
 PAUFIQUE, PAUFIQUE FORCEPS 23
 PAUFIQUE, PAUFIQUE SCLEROTOME KNIFE 3
 PEARCE, PEARCE IRRIGATING CANNULA 7
 PHACO, WIRE SPECULUM FOR PHACO 1
 PICK-UP AND FOLD, PICK-UP AND FOLD FORCEPS 24
 PLEY, PLEY EYE SPECULUM 1
 PROBE, GALEZOWSKI LACRIMAL PROBE 29

R

RAZOR BLADES 3
 RETRACTOR, BONN RETRACTOR 2
 RETRACTOR, DESMARRS LID RETRACTOR 2
 RETRACTOR, KNAPP LACRIMAL RETRACTOR 30
 RING, GLOBE FIXATION RING 13
 RK, RK DIAMOND MICROMETER KNIFE 31
 RONGEUR, KERRISON BONE NIBBLING RONGEUR 30
 RYCROFT, RYCROFT AIR CANNULA 16

S

SALZ, SALZ NUCLEUS SPLITTER 24
 SCISSORS, BARRAQUER IRIS SCISSORS 11
 SCISSORS, BONN SCISSORS 9
 SCISSORS, CASTROVIEJO SCISSORS 11
 SCISSORS, CORNIC CAPSULOTOMY SCISSORS 12
 SCISSORS, ENUCLEATION SCISSORS 10
 SCISSORS, EYE SCISSORS 9
 SCISSORS, GALAND CAPSULOTOMY SCISSORS 12
 SCISSORS, KATZIN CORNEAL TRANSPLANT SCISSORS 11
 SCISSORS, LAFORGE CORNIC CAPSULOTOMY SCISSORS 12

SCISSORS, LESCURE GALAND CAPSULOTOMY SCISSORS 12
 SCISSORS, SEVRIN STEVENS TENOTOMY SCISSORS 10
 SCISSORS, VANNAS IRIS SCISSORS 12
 SCISSORS, VANNAS SCISSORS 12
 SCISSORS, WECKER IRIS SCISSORS 10
 SCISSORS, WESTCOTT TENOTOMY SCISSORS 11
 SCLERAL DEPRESSOR, SCLERAL DEPRESSOR AND FIXATION PICK 8
 SCLERAL POCKET, DIAMOND KNIFE "SCLERAL POCKET" 31
 SCLEROTOME, PAUFIQUE SCLEROTOME KNIFE 3
 SERREFINE 21
 SEVRIN STEVENS, SEVRIN STEVENS TENOTOMY SCISSORS 10
 SICHEL WILDER, SICHEL WILDER LACRIMAL DILATOR 29
 SIMCOE, ORIGINAL SIMCOE I/A CANNULA 15
 SIMCOE, REVERSED SIMCOE I/A CANNULA 15
 SIMCOE, SIMCOE CANNULA 13
 SINSKEY, SINSKEY HOOK 6
 SINSKEY CORNIC, SINSKEY CORNIC HOOK 6
 SNELLEN, SNELLEN LENS LOOP 7
 SPATULA, BARRAQUER SPATULA 5
 SPATULA, CULLER IRIS SPATULA 5
 SPECULUM, BARRAQUER WIRE SPECULUM 1
 SPECULUM, CASTROVIEJO EYE SPECULUM 2
 SPECULUM, CORCELLE EYE SPECULUM 1
 SPECULUM, PLEY EYE SPECULUM 1
 SPECULUM, WIRE SPECULUM FOR PHACO 1
 SPLITTER, SALZ NUCLEUS SPLITTER 24
 SPOON, EVISCERATION SPOON 4
 SPUD, FOREIGN BODY SPUD 3
 STERILIZING TRAYS 28
 SYRINGE 8

T

TEYSSIER, TEYSSIER NUCLEUS BISECTOR 5
 THX, THX ABRASIVE CANNULA 16
 THX, THX CLUB DE GOLF I/A CANNULA 15
 THX, THX I/A CANNULA 14
 THX TEYSSIER, THX TEYSSIER I/A CANNULA 14
 THX TURUT, THX TURUT I/A CANNULA 14
 TIP, 45° ANGLED INTERCHANGEABLE TIP 18
 TIP, 45° ANGLED TIP 18
 TIP, 90° ANGLED INTERCHANGEABLE TIP 18
 TIP, 90° ANGLED TIP 18
 TIP, BINKHORST INTERCHANGEABLE TIP 18
 TIP, BINKHORST TIP 18
 TIP, CURVED INTERCHANGEABLE TIP 18
 TIP, STRAIGHT INTERCHANGEABLE TIP 18
 TIP, STRAIGHT TIP 18
 TISSUE, ADSON TISSUE FORCEPS 20
 TISSUE, TISSUE FORCEPS 20
 TOWEL CLAMP 21
 TRAYS, STERILIZING TRAYS 28
 TREPHINE, TREPHINE FCI TYP 4
 TROUTMAN, BLADE BREAKER AND HOLDER 3
 TROUTMAN, TROUTMAN TYING FORCEPS 21,22
 TUBING, SILICONE TUBING 15

U


UNIVERSAL EYE SHIELD 8
 UTRATA, CURVED UTRATA FORCEPS 19
 UTRATA, UTRATA FORCEPS 19

V

VANNAS, VANNAS SCISSORS 12
 VANNAS, VANNAS IRIS SCISSORS 12
 VECTIS, CORNIC NUCLEUS VECTIS 5

W

WECKER, WECKER IRIS SCISSORS 10
 WESTCOTT, WESTCOTT TENOTOMY SCISSORS 11

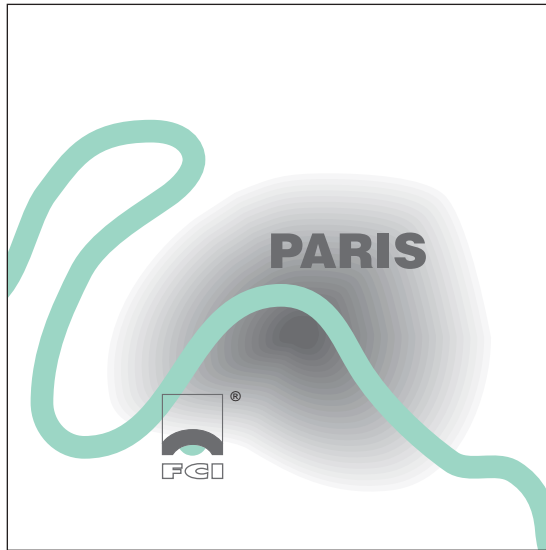

20 - 22, RUE LOUIS ARMAND - BP 40062
75722 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
TEL. : +33 (0) 1 53 98 98 98 - FAX : +33 (0) 1 53 98 98 99
E-mail : fci@fci.fr - Web : <http://www.fci.fr>